




PRESSALIT®

Product Varunummer	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd R1622000112
Färg	VVS: 777525412 NRF: 6314098 RSK: 8162782 EAN: 5708590377728 HMI: 124486 Antracitgrå
Beskrivning	 VALUE IV duschsits och ryggstöd är den enkla lösningen för användare som behöver kunna sitta ner medan de tar en dusch. VALUE IV duschsits. Fast höjd. Sits är uppfällbart. Material: Pressgjuten aluminium, Rilsan-belagt, rostfritt stål och vakuumformad polyeten (PE). Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Max brukarvikt: 125 kg. När duschsitsen belastas med 125 kg, belastas varje fästskruv med 95 kg. <i>VALUE duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner	Väggbeslag är tillverkat i pressgjuten aluminium, ramen och stödben i Rilsan-belagt, rostfritt stål. Rilsan-beläggningen skyddar mot rost, är skön att röra vid och enkel att rengöra. Sitsen är tillverkat av vakuumformad polyeten (PE). En del brukare behöver sitta ned när de duschar. Den uppfällbara duschsitsen är designad för montering i duschområdet och kan enkelt fällas upp och ned efter behov. Den uppfällbara duschsitsen kan enkelt monteras av vid rengöring.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

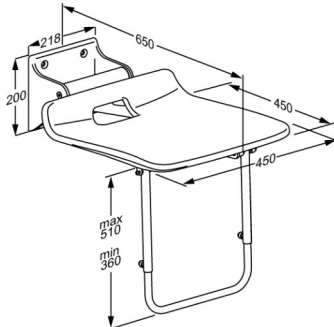

PRESSALIT®

Product	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd
Varunummer	R1622000112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

Product	VALUE IV uppfällbar duschsits med stödben, fast höjd
Varunummer	R1622000112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®