




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte en zijwaarts verstelbaar R485019000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 654022900 NRF: 6132473 EAN: 5708590381053 HMI: 138118  MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen. MATRIX ANGLE DEEP muurframe voor wastafel, rechts, voor wandmontage, met witte installatie dekking, incl. flexibele aansluitset en sifon (R2058). Elektrisch in hoogte verstelbaar 300 mm met bedieningspaneel (aan wastafel), en handmatig zijwaarts verstelbaar 500 mm. Incl bevestigingsbouten voor wastafel. (kan alleen worden gebruikt met MATRIX Angel Deep wastafels, R2150/R2151). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materiaal: Gepoedercoat roestvrij staal, PMMA, ABS en polystyren. Exclusief bevestigingsset.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 300 mm

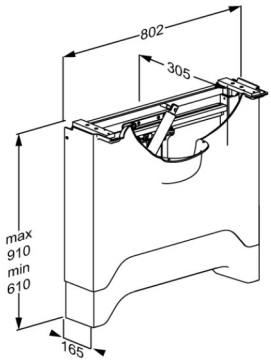

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte en zijwaarts verstelbaar R485019000
Product capaciteit	Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 160 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 30 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 60 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 30 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 160 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 11,75 mm/s Speed down mm: 11,75 mm/s
Noise level	50 dB
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal, PMMA, ABS en polystyren.
Mains connection (V)	230
Actuator (motor)	LA40 HB
Control box	CA63
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 66 W Power consumption by standby: 0,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte en zijwaarts verstelbaar R485019000
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in: - Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen - Machinerichtlijn 2006/42/EEG - RoHS-richtlijn 2011/65/EG.



PRESSALIT®

Product	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte en zijwaarts verstelbaar
Artikelnummer	R485019000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte en zijwaarts verstelbaar R485019000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com

Pressalit A/S
 Pressalitvej 1
 DK-8680 Ry
 Tel.: +45 8788 8788
 Fax: +45 8788 8789
 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®