




PRESSALIT®

Product Varunummer	MCT 3 mobil vårdbrits, elektriskt höjdreglerbar R9632721000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777542320 EAN: 5708590389943 HMI: 139822  Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdjusterbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn. Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra. Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren. MCT 3 mobilt vårdbrits, 700 x 1900 mm, två nedfällbara sidor. Elektrisk höjdjusterbar med manöverdosa. 500 mm höjdjustering från 450 till 950 mm. Madrass måste beställas separat.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	500 mm
Produktkapacitet	Max brukarvikt (MUM): 200 kg Max belastning (SWL): 205 kg. <i>Britsen har testats statiskt med 512,5 kg, enligt kraven i IEC 60601-1-standardens som kräver testning med säkerhetsfaktor 2,5.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 17 mm/s Hastighet ner: 17 mm/s
Ljudnivå	50 dB
Material	Plastmaterial, kompakt laminat och lackerat stål.

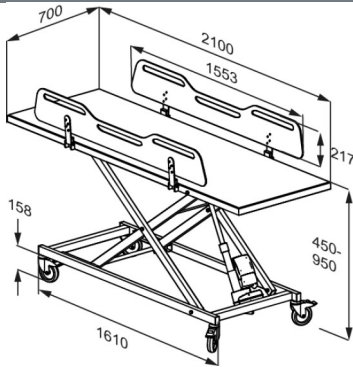

Product Varunummer	MCT 3 mobil vårdbrits, elektriskt höjdreglerbar R9632721000
Ergonomi	• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare. • Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av dusch-vårdbritsen. • De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning. • Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier.
Funktioner	• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. • Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 (Linak) IPX6
Kontrollbox	CA30 (Linak) IPX6
Manöverdosa	HB30 (Linak) IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 330 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.



PRESSALIT®

Product	MCT 3 mobil vårdbits, elektriskt höjdglerbar
Varunummer	R9632721000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

pressalit.com

PRESSALIT®